

Smart Subscription for CT Scanner Installation Manual

OPERATING DOCUMENTATION



5826427-1EN
Revision 1
© 2019 General Electric Company
All rights reserved.

LEGAL NOTES

TRADEMARKS

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo, Exchange, and PostScript are trademarks of Adobe Systems Incorporated or its subsidiaries and may be registered in certain jurisdictions.

Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation.

All other products and their name brands are trademarks of their respective holders.

COPYRIGHTS

All Material Copyrighted (c) 2019 by the GE Company, All rights reserved.

Language Policy

Direction 2128126 - Language Policy For Service Documentation

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ (BG)	<p>Това упътване за работа е налично само на английски език.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ако доставчикът на услугата на клиента изиска друг език, задължение на клиента е да осигури превод. Не използвайте оборудването, преди да сте се консултирали и разбрали упътването за работа. Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване на доставчика на услугата, оператора или пациента в резултат на токов удар, механична или друга опасност.
警告 (ZH-CN)	<p>本维修手册仅提供英文版本。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果客户的维修服务人员需要非英文版本，则客户需自行提供翻译服务。 未详细阅读和完全理解本维修手册之前，不得进行维修。 忽略本警告可能对维修服务人员、操作人员或患者造成电击、机械伤害或其他形式的伤害。
警告 (ZH-HK)	<p>本服務手冊僅提供英文版本。</p> <ul style="list-style-type: none"> 倘若客戶的服務供應商需要英文以外之服務手冊，客戶有責任提供翻譯服務。 除非已參閱本服務手冊及明白其內容，否則切勿嘗試維修設備。 不遵從本警告或會令服務供應商、網絡供應商或病人受到觸電、機械性或其他形式的危險。
警告 (ZH-TW)	<p>本維修手冊僅有英文版。</p> <ul style="list-style-type: none"> 若客戶的維修廠商需要英文版以外的語言，應由客戶自行提供翻譯服務。 請勿試圖維修本設備，除非 您已查閱並瞭解本維修手冊。 若未留意本警告，可能導致維修廠商、操作員或病患因觸電、機械或其他危險而受傷。
UPOZOR- ENJE (HR)	<p>Ovaj servisni priručnik dostupan je na engleskom jeziku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako davatelj usluge klijenta treba neki drugi jezik, klijent je dužan osigurati prijevod. Ne pokušavajte servisirati opremu ako niste u potpunosti pročitali i razumjeli ovaj servisni priručnik. Zanemarite li ovo upozorenje, može doći do ozljede davatelja usluge, operatera ili pacijenta uslijed strujnog udara, mehaničkih ili drugih rizika.

VÝSTRAHA (CS)	<p>Tento provozní návod existuje pouze v anglickém jazyce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě, že externí služba zákazníkům potřebuje návod v jiném jazyce, je zajištění překladu do odpovídajícího jazyka úkolem zákazníka. • Nesnažte se o údržbu tohoto zařízení, aniž byste si přečetli tento provozní návod a pochopili jeho obsah. • V případě nedodržování této výstrahy může dojít k poranění pracovníka prodejního servisu, obslužného personálu nebo pacientů vlivem elektrického proudu, respektive vlivem mechanických či jiných rizik.
ADVARSEL (DA)	<p>Denne servicemanual findes kun på engelsk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis en kundes tekniker har brug for et andet sprog end engelsk, er det kundens ansvar at sørge for oversættelse. • Forsøg ikke at servicere udstyret uden at læse og forstå denne servicemanual. • Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre skade på grund af elektrisk stød, mekanisk eller anden fare for teknikeren, operatøren eller patienten.
WAARSCHUWING (NL)	<p>Deze onderhoudshandleiding is enkel in het Engels verkrijgbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als het onderhoudspersoneel een andere taal vereist, dan is de klant verantwoordelijk voor de vertaling ervan. • Probeer de apparatuur niet te onderhouden alvorens deze onderhoudshandleiding werd geraadpleegd en begrepen is. • Indien deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, zou het onderhoudspersoneel, de operator of een patiënt gewond kunnen raken als gevolg van een elektrische schok, mechanische of andere gevaren.
WARNING (EN)	<p>This service manual is available in English only.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If a customer's service provider requires a language other than English, it is the customer's responsibility to provide translation services. • Do not attempt to service the equipment unless this service manual has been consulted and is understood. • Failure to heed this warning may result in injury to the service provider, operator or patient from electric shock, mechanical or other hazards.
HOIATUS (ET)	<p>See teenindusjuhend on saadaval ainult inglise keeles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kui klienditeeninduse osutaja nõuab juhendit inglise keelest erinevas keeles, vastutab klient tõlketeenuse osutamise eest. • Ärge üritage seadmeid teenindada enne eelnevalt käesoleva teenindusjuhendiga tutvumist ja sellest aru saamist. • Käesoleva hoiatuse eiramine võib põhjustada teenuseosutaja, operaatori või patsiendi vigastamist elektrilöögi, mehaanilise või muu ohu tagajärjel.

VAROITUS (FI)	<p>Tämä huolto-ohje on saatavilla vain englanniksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jos asiakkaan huoltohenkilöstö vaatii muuta kuin englanninkielistä materiaalia, tarvittavan käännöksen hankkiminen on asiakkaan vastuulla. • Älä yritä korjata laitteistoa ennen kuin olet varmasti lukenut ja ymmärtänyt tämän huolto-ohjeen. • Mikäli tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla huoltohenkilöstön, laitteiston käyttäjän tai potilaan vahingoittuminen sähköiskun, mekaanisen vian tai muun vaaratilanteen vuoksi.
ATTENTION (FR)	<p>Ce manuel d'installation et de maintenance est disponible uniquement en anglais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le technicien d'un client a besoin de ce manuel dans une langue autre que l'anglais, il incombe au client de le faire traduire. • Ne pas tenter d'intervenir sur les équipements tant que ce manuel d'installation et de maintenance n'a pas été consulté et compris. • Le non-respect de cet avertissement peut entraîner chez le technicien, l'opérateur ou le patient des blessures dues à des dangers électriques, mécaniques ou autres.
WARNUNG (DE)	<p>Diese Serviceanleitung existiert nur in englischer Sprache.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falls ein fremder Kundendienst eine andere Sprache benötigt, ist es Aufgabe des Kunden für eine entsprechende Übersetzung zu sorgen. • Versuchen Sie nicht diese Anlage zu warten, ohne diese Serviceanleitung gelesen und verstanden zu haben. • Wird diese Warnung nicht beachtet, so kann es zu Verletzungen des Kundendiensttechnikers, des Bedieners oder des Patienten durch Stromschläge, mechanische oder sonstige Gefahren kommen.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)	<p>Το παρόν εγχειρίδιο σέρβις διατίθεται στα αγγλικά μόνο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν το άτομο παροχής σέρβις ενός πελάτη απαιτεί το παρόν εγχειρίδιο σε γλώσσα εκτός των αγγλικών, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης. • Μην επιχειρήσετε την εκτέλεση εργασιών σέρβις στον εξοπλισμό εκτός εάν έχετε συμβουλευτεί και έχετε κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο σέρβις. • Εάν δεν λάβετε υπόψη την προειδοποίηση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στο άτομο παροχής σέρβις, στο χειριστή ή στον ασθενή από ηλεκτροπληξία, μηχανικούς ή άλλους κινδύνους.
FIGYELMEZTETÉS (HU)	<p>Ezen karbantartási kézikönyv kizárólag angol nyelven érhető el.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha a vevő szolgáltatója angoltól eltérő nyelvre tart igényt, akkor a vevő felelőssége a fordítás elkészíttetése. • Ne próbálja elkezdni használni a berendezést, amíg a karbantartási kézikönyvben leírtakat nem értelmezték. • Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a szolgáltató, működtető vagy a beteg áramlítás, mechanikai vagy egyéb veszélyhelyzet miatti sérülését eredményezheti.

AÐVÖRUN (IS)	<p>Þessi þjónustuhandbók er aðeins fánleg á ensku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ef að þjónustuveitandi viðskiptamanns þarfnast annas tungumáls en ensku, er það skylda viðskiptamanns að skaffa tungumálþjónustu. Reynið ekki að afgreiða tækið nema að þessi þjónustuhandbók hefur verið skoðuð og skilin. Brot á sinna þessari aðvörðun getur leitt til meiðsla á þjónustuveitanda, stjórnanda eða sjúklinga frá raflosti, vélrænu eða öðrum áhættum.
AVVERTENZA (IT)	<p>Il presente manuale di manutenzione è disponibile soltanto in lingua inglese.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se un addetto alla manutenzione richiede il manuale in una lingua diversa, il cliente è tenuto a provvedere direttamente alla traduzione. Procedere alla manutenzione dell'apparecchiatura solo dopo aver consultato il presente manuale ed averne compreso il contenuto. Il mancato rispetto della presente avvertenza potrebbe causare lesioni all'addetto alla manutenzione, all'operatore o ai pazienti provocate da scosse elettriche, urti meccanici o altri rischi.
警告 (JA)	<p>このサービスマニュアルには英語版しかありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> サービスを担当される業者が英語以外の言語を要求される場合、翻訳作業はその業者の責任で行うものとさせていただきます。 このサービスマニュアルを熟読し理解せずに、装置のサービスを行わないでください。 この警告に従わない場合、サービスを担当される方、操作員あるいは患者さんが、感電や機械的又はその他の危険により負傷する可能性があります。
경고 (KO)	<p>본 서비스 매뉴얼은 영어로만 이용하실 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 고객의 서비스 제공자가 영어 이외의 언어를 요구할 경우, 번역 서비스를 제공하는 것은 고객의 책임입니다. 본 서비스 매뉴얼을 참조하여 숙지하지 않은 이상 해당 장비를 수리하려고 시도하지 마십시오. 본 경고 사항에 유의하지 않으면 전기 쇼크, 기계적 위험, 또는 기타 위험으로 인해 서비스 제공자, 사용자 또는 환자에게 부상을 입힐 수 있습니다.
BRĪDINĀJUMS (LV)	<p>Šī apkopes rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja klienta apkopes sniedzējam nepieciešama informācija citā valodā, klienta pienākums ir nodrošināt tulkojumu. Neveiciet aprīkojuma apkopi bez apkopes rokasgrāmatas izlasīšanas un saprašanas. Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties elektriskās strāvas trieciena, mehānisku vai citu faktoru izraisītu traumu risks apkopes sniedzējam, operatoram vai pacientam.

ĮSPĖJIMAS (LT)	<p>Šis eksploataavimo vadovas yra tik anglų kalba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jei kliento paslaugų tiekėjas reikalauja vadovo kita kalba – ne anglų, suteikti vertimo paslaugas privalo klientas. • Nemėginkite atlikti įrangos techninės priežiūros, jei neperskaitėte ar nesupratote šio eksploataavimo vadovo. • Jei nepaisysite šio įspėjimo, galimi paslaugų tiekėjo, operatoriaus ar paciento sužalojimai dėl elektros šoko, mechaninių ar kitų pavojų.
ADVARSEL (NO)	<p>Denne servicehåndboken finnes bare på engelsk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis kundens serviceleverandør har bruk for et annet språk, er det kundens ansvar å sørge for oversettelse. • Ikke forsøk å reparere utstyret uten at denne servicehåndboken er lest og forstått. • Manglende hensyn til denne advarselen kan føre til at serviceleverandøren, operatøren eller pasienten skades på grunn av elektrisk støt, mekaniske eller andre farer.
OSTRZEŻENIE (PL)	<p>Niniejszy podręcznik serwisowy dostępny jest jedynie w języku angielskim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli serwisant klienta wymaga języka innego niż angielski, zapewnienie usługi tłumaczenia jest obowiązkiem klienta. • Nie próbować serwisować urządzenia bez zapoznania się z niniejszym podręcznikiem serwisowym i zrozumienia go. • Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może doprowadzić do obrażeń serwisanta, operatora lub pacjenta w wyniku porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia mechanicznego bądź innego.
ATENÇÃO (PT-BR)	<p>Este manual de assistência técnica encontra-se disponível unicamente em inglês.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se outro serviço de assistência técnica solicitar a tradução deste manual, caberá ao cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • A não observância deste aviso pode ocasionar ferimentos no técnico, operador ou paciente decorrentes de choques elétricos, mecânicos ou outros.
ATENÇÃO (PT-PT)	<p>Este manual de assistência técnica só se encontra disponível em inglês.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se qualquer outro serviço de assistência técnica solicitar este manual noutro idioma, é da responsabilidade do cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • O não cumprimento deste aviso pode colocar em perigo a segurança do técnico, do operador ou do paciente devido a choques eléctricos, mecânicos ou outros.

ATENȚIE (RO)	<p>Acest manual de service este disponibil doar în limba engleză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă un furnizor de servicii pentru clienți necesită o altă limbă decât cea engleză, este de datoria clientului să furnizeze o traducere. • Nu încercați să reparați echipamentul decât ulterior consultării și înțelegerii acestui manual de service. • Ignorarea acestui avertisment ar putea duce la rănirea depanatorului, operatorului sau pacientului în urma pericolelor de electrocutare, mecanice sau de altă natură.
ОСТОРОЖН О! (RU)	<p>Данное руководство по техническому обслуживанию представлено только на английском языке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если сервисному персоналу клиента необходимо руководство не на английском, а на каком-то другом языке, клиенту следует самостоятельно обеспечить перевод. • Перед техническим обслуживанием оборудования обязательно обратитесь к данному руководству и поймите изложенные в нем сведения. • Несоблюдение требований данного предупреждения может привести к тому, что специалист по техобслуживанию, оператор или пациент получит удар электрическим током, механическую травму или другое повреждение.
UPOZOR- ENJE (SR)	<p>Ovo servisno uputstvo je dostupno samo na engleskom jeziku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako klijentov serviser zahteva neki drugi jezik, klijent je dužan da obezbedi prevodilačke usluge. • Ne pokušavajte da opravite uređaj ako niste pročitali i razumeli ovo servisno uputstvo. • Zanemarivanje ovog upozorenja može dovesti do povređivanja serviser, rukovaoca ili pacijenta usled strujnog udara ili mehaničkih i drugih opasnosti.
UPOZORNE- NIE (SK)	<p>Tento návod na obsluhu je k dispozícii len v angličtine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak zákazníkovi poskytovateľ služieb vyžaduje iný jazyk ako angličtinu, poskytnutie prekladateľských služieb je zodpovednosťou zákazníka. • Nepokúšajte sa o obsluhu zariadenia, kým si neprečítate návod na obsluhu a neporozumiete mu. • Zanedbanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie poskytovateľa služieb, obsluhujúcej osoby alebo pacienta elektrickým prúdom, mechanické alebo iné ohrozenie.
ATENCION (ES)	<p>Este manual de servicio sólo existe en inglés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el encargado de mantenimiento de un cliente necesita un idioma que no sea el inglés, el cliente deberá encargarse de la traducción del manual. • No se deberá dar servicio técnico al equipo, sin haber consultado y comprendido este manual de servicio. • La no observancia del presente aviso puede dar lugar a que el proveedor de servicios, el operador o el paciente sufran lesiones provocadas por causas eléctricas, mecánicas o de otra naturaleza.

<p>VARNING (SV)</p>	<p>Den här servicehandboken finns bara tillgänglig på engelska.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om en kunds servicetekniker har behov av ett annat språk än engelska, ansvarar kunden för att tillhandahålla översättningstjänster. • Försök inte utföra service på utrustningen om du inte har läst och förstår den här servicehandboken. • Om du inte tar hänsyn till den här varningen kan det resultera i skador på serviceteknikern, operatören eller patienten till följd av elektriska stötar, mekaniska faror eller andra faror.
<p>OPOZORILO (SL)</p>	<p>Ta servisni priročnik je na voljo samo v angleškem jeziku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Če ponudnik storitve stranke potrebuje priročnik v drugem jeziku, mora stranka zagotoviti prevod. • Ne poskušajte servisirati opreme, če tega priročnika niste v celoti prebrali in razumeli. • Če tega opozorila ne upoštevate, se lahko zaradi električnega udara, mehanskih ali drugih nevarnosti poškoduje ponudnik storitev, operater ali bolnik.
<p>DİKKAT (TR)</p>	<p>Bu servis kılavuzunun sadece ingilizcesi mevcuttur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eğer müşteri teknisyeni bu kılavuzu ingilizce dışında bir başka lisandan talep ederse, bunu tercüme ettirmek müşteriye düşer. • Servis kılavuzunu okuyup anlamadan ekipmanlara müdahale etmeyiniz. • Bu uyarıya uyulmaması, elektrik, mekanik veya diğer tehlikelerden dolayı teknisyen, operatör veya hastanın yaralanmasına yol açabilir.

Damage in Transportation

All packages should be closely examined at time of delivery. If damage is apparent, have notation "damage in shipment" written on all copies of the freight or express bill before delivery is accepted or "signed for" by a General Electric representative or a hospital receiving agent. Whether noted or concealed, damage MUST be reported to the carrier immediately upon discovery, or in any event, within 14 days after receipt, and the contents and containers held for inspection by the carrier. A transportation company will not pay a claim for damage if an inspection is not requested within this 14 day period.

To file a report:

- Call 1-800-548-3366 and use option 6.
- Fill out the GIQ workflow for any items missing, damaged, OBF/FOI for in process installs: http://supportcentral.ge.com/ProcessMaps/form_new_request.asp?prod_id=268679&form_id=573167&node_id=1916016&map_id=&reference_id=&reference_type
- Contact your local service coordinator for more information on this process.

Rev. Nov. 10, 2017

Certified Electrical Contractor Statement

All electrical Installations that are preliminary to positioning of the equipment at the site prepared for the equipment shall be performed by licensed electrical contractors. In addition, electrical feeds into the Power Distribution Unit shall be performed by licensed electrical contractors. Other connections between pieces of electrical equipment, calibrations and testing shall be performed by qualified GE Medical personnel. The products involved (and the accompanying electrical installations) are highly sophisticated, and special engineering competence is required. In performing all electrical work on these products, GE will use its own specially trained field engineers. All of GE's electrical work on these products will comply with the requirements of the applicable electrical codes.

The purchaser of GE equipment shall only utilize qualified personnel (i.e., GE's field engineers, personnel of third-party service companies with equivalent training, or licensed electricians) to perform electrical servicing on the equipment.

Lithium Battery Cautionary Statements



RISK OF EXPLOSION.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ATTENTION

DANGER D'EXPLOSION

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.

Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Omissions & Errors

Customers, please contact your GE Sales or Service representatives.

GE personnel, please use the Healthcare PQR Process to report all omissions, errors, and defects in this publication.

Contents

1 Readme	1
1.1 Revision History	1
2 Prevace Publication Conventions	3
2.1 Preface	3
2.2 Safety & Hazard Information	3
2.2.1 Text and Character Representation	3
2.2.2 Graphical Representation	4
2.3 Publication Conventions	5
2.3.1 General Paragraph and Character Styles	5
2.3.2 Page Layout	6
2.3.3 Computer Screen Output/Input Text Character Styles	6
2.3.4 Buttons, Switches and Keyboard Inputs (Hard & Soft Keys)	7
3 Procedure	9
3.1 Smart Subscription Installation Flow Chart	9
3.2 Prerequisite	10
3.3 Reference Document	10
3.4 Preparation	10
3.5 Unpacking the ML350 (EES)	10
3.6 Cabling Between ML350 and Switch (EES)	11
3.7 Connect FE Laptop to EES	11
3.8 ML350 Hardware Status Check (EES)	11
3.9 Site Specific Configuration (EES)	11
3.10 Insite (RSvP) Connection (EES)	11
3.11 Check Private IP address of EES (EES)	12
3.12 CT Option Key Install [SmartSubscription -connection] (CT)	12
3.13 Remote Applications Installation (EES)	12
3.14 ML350 Platform Software Status Check (EES)	12
3.15 Cleanup (EES)	13

Page intentionally left blank

1 Readme

1.1 Revision History

Revision	Date	Reason for change
1	July 08, 2019	Initial Release

Page intentionally left blank

2 Prevace Publication Conventions

2.1 Preface

Purpose: Standardize conventions for representing information is a uniform way of communicating information to a reader in a consistent manner. Conventions are used so that the reader can easily recognize the actions or decisions that must be made. There are a number of character and paragraph styles used in this publication to accomplish this task. Please become familiar with them before proceeding forward.

2.2 Safety & Hazard Information

2.2.1 Text and Character Representation

Within this publication, different paragraph and character styles have been used to indicate potential hazards. Paragraph prefixes, such as hazard, caution, danger and warning, are used to identify important safety information. Text (Hazard) styles are applied to the paragraph contents that is applicable to each specific safety statement. Words describe the type of potential hazard that may be encountered and are placed immediately before the paragraph it modifies. Safety information will normally include:

- Type of potential Hazard
- Nature of potential injury
- Causative condition
- How to avoid or correct the causative condition

EXAMPLES OF HAZARD STATEMENTS USED

It's important that you read and understand hazard statements, and not just ignore them.



SEVERE PERSONAL INJURY

DANGER IS USED WHEN A HAZARD EXISTS WHICH WILL CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH IF INSTRUCTIONS ARE IGNORED. THEY CAN INCLUDE:

- ELECTROCUTION
- CRUSHING
- RADIATION



SEVERE PERSONAL INJURY

WARNING IS USED WHEN A HAZARD EXISTS WHICH COULD OR CAN CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH IF INSTRUCTIONS ARE IGNORED. THEY CAN INCLUDE:

- POTENTIAL FOR SHOCK
- EXPOSED WIRES
- FAILURE TO TAG AND LOCKOUT SYSTEM POWER COULD ALLOW FOR UN-COMMANDED MOTION.



MINOR PERSONAL INJURY

Caution is used when a hazard exists which can or could cause minor injury to self or others if instructions are ignored. They include for example:

- Loss of critical patient data
- Crush or pinch points
- Sharp objects



PROPERTY DAMAGE ONLY

Notice is used when a hazard is present that can cause property damage but has absolutely no personal injury risk. They can include:

- Disk drive will be destroyed
- Internal mechanical damage, such as to the x-ray tube
- Coasting the rotor through resonance.

2.2.2 Graphical Representation

Important information will always be preceded by the exclamation point



contained within a

triangle, as seen throughout the Preface chapter. In addition to text, several different graphical icons (symbols) may be used to make you aware of specific types of hazards that could possibly cause harm.

2.3 Publication Conventions

2.3.1 *General Paragraph and Character Styles*

Prefixes are used to highlight important non-safety related information. Paragraph prefixes (such as Purpose, Example, Comment or Note) are used to identify important but non-safety related information. Text styles are also applied to text within each paragraph modified by the specific prefix.

EXAMPLES OF PREFIXES USED FOR GENERAL INFORMATION:

Purpose:

Introduces and provides meaning as to the information contained within the chapter, section or subsection (such as used at the beginning this chapter, for example).

NOTE

Conveys information that should be considered important to the reader.

Example:

Used to make the reader aware that the paragraph(s) that follow are examples of information possibly stated previously.


Comment:

Represents “additional” information that may or may not be relevant to your situation.

2.3.2 Page Layout

Publication Part Number & Revision Number

Publication Title

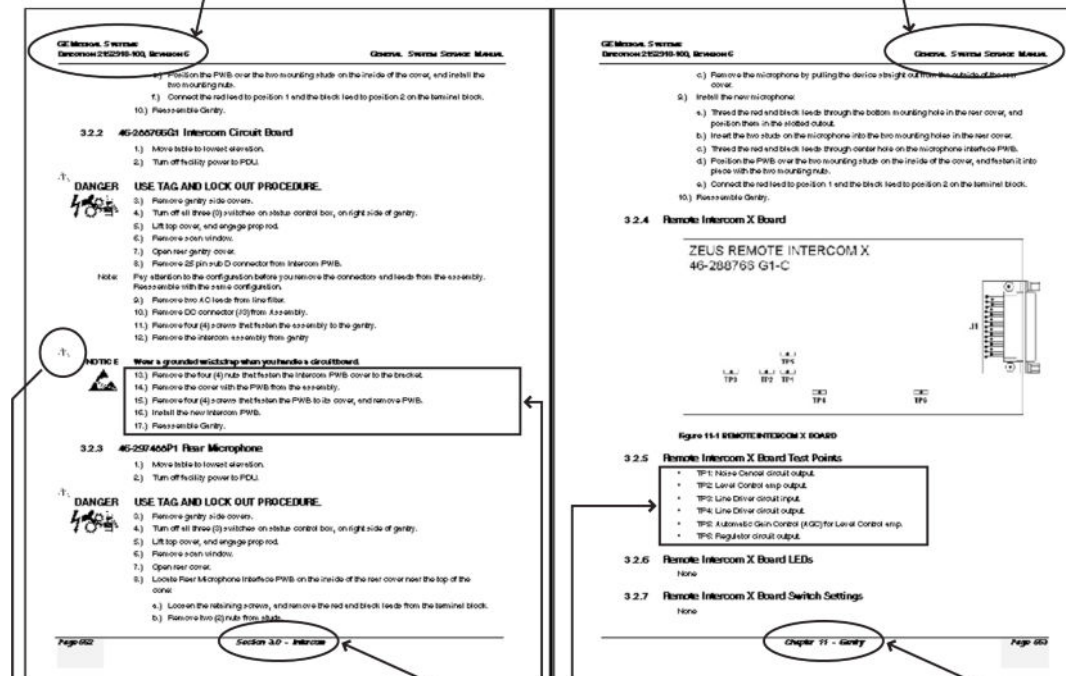

The current section and its title are always shown in the footer of the left (even) page.

An exclamation point in a triangle is used to indicate important information to the user.

Paragraphs preceded by **Alphanumeric** characters (e.g. numbers) contain information that must be followed in a **specific order**.

The current chapter and its title are always shown in the footer of the right (odd) page.

Paragraphs preceded by a **symbol** (e.g. bullets) contain information that has **no specific order**.

Headers and footers in this publication are designed to allow you to quickly identify your location. The document part number and revision number appear in every header on every page. Odd numbered page footers indicate the current chapter, its title and current page number. Even numbered page footers show the current section and its title, as well as the current page number.

2.3.3 Computer Screen Output/Input Text Character Styles

Within this publication, mono-spaced character styles (fonts) are used to indicate computer text that is either screen input or output. Mono-spaced fonts, such as `courier`, are used to indicate text direction. When you type at your keyboard, you are generating computer input. Occasionally you will see the math operator “greater-than” and “less-than” symbols used to indicate the start and finish of variable output. When reading text generated by the computer, you are reading it as computer generated output. In addition to direction, characters are italicized (e.g. *italics*) to indicate information specific to your system or site.

Example: Fixed Output

This paragraph's font represents computer generated screen "fixed" output. Its output is fixed from the sense that it does not vary from application to application. It is the most commonly used style used to indicate filenames, paths and text that do not change from system to system. The character style used is a fixed width such as courier.

Example: Variable Output

This paragraph's font represents computer screen output that is "variable". It is used to represent output that varies from application to application or system to system. Variable output is sometimes found placed between greater-than and less-than operators for clarification. For example: <variable_ouput> or <3.45.120.3>. In both cases, the < and > operators are not part of the actual input.

Example: Fixed Input

This paragraph's font represents fixed input. It is computer input that is typed-in via the keyboard. Typed input that does not vary from application to application or system to system. Fixed text the user is required to supply as input. For example: cd /usr/3p

Example: Variable Input

This paragraph's font represents computer input that can vary from application to application or system to system. With variable text, the user is required to supply system dependent input or information. Variable input sometimes is placed between greater-than and less-than operators. For example: <variable_input>. In these cases, the (<>) operators would be dropped prior to input. For example: ypcat hosts | grep <3.45.120.3> would be typed into the computer as

ypcat hosts | grep 3.45.120.3

without the greater-than and less-than operators.

2.3.4 Buttons, Switches and Keyboard Inputs (Hard & Soft Keys)

Different character styles are used to indicate actions requiring the reader to press either a hard or soft button, switch or key. Physical hardware, such as buttons and switches, are called hard keys because they are hard wired or mechanical in nature. A keyboard or on/off switch would be a hard key. Software or computer generated buttons are called soft keys because they are software generated. Software driven menu buttons are an example of such keys. Soft and hard keys are represented differently in this publication.

Example: Hard Keys

A power switch **ON/OFF** or a keyboard key like **ENTER** is indicated by applying a character style that uses both over and under-lined bold text. This is a hard key.

Example: Soft Keys


Whereas the computer **MENU** button that you would click with your mouse or touch with your hand uses over and under-lined regular text. This is a soft key.

Page intentionally left blank

3 Procedure

3.1 Smart Subscription Installation Flow Chart

Figure 1 Smart Subscription installation Flow Chart

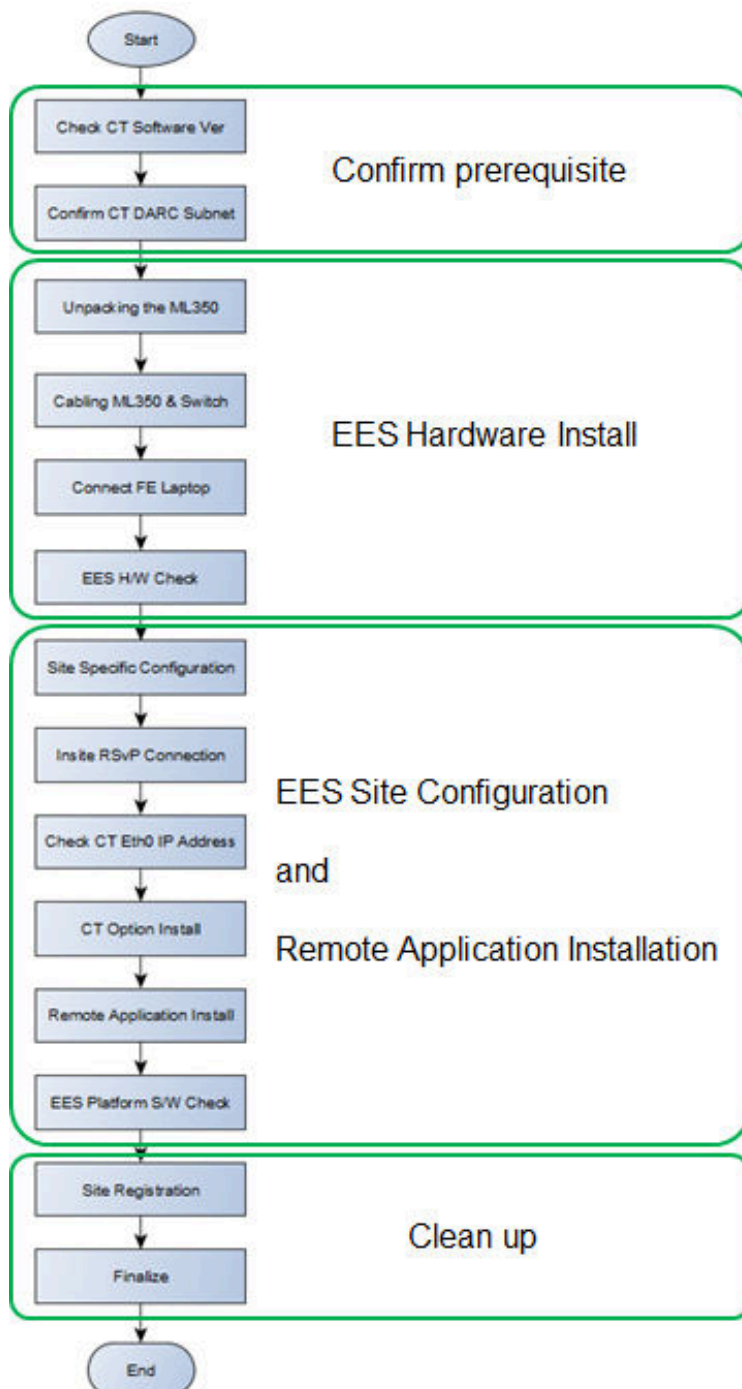

3.2 Prerequisite

1. EES Platform Software Installation is completed.
2. 4 consecutive static IP Address are already provided by customer.
3. System ID for EES is required for **RSvP** and **Site** Configuration.
4. One Ethernet cable is required to connect the EES to the FE laptop.

Refer to **[Required Conditions]** of Common Software Procedure in **[Edge Platform Service Guide]**

3.3 Reference Document

- Edge Platform Pre-Installation Manual
- Edge Platform Installation Manual
- Edge Platform Services Guide
- CT Scanner Service Method (Installation → Smart Subscription)

3.4 Preparation

- **Save User Protocols on CT Scanner (CT)**

This step performs User Protocols Backup.

- **Check CT Scanner Software Version (CT)**

This step confirms that the CT scanner software version is compatible with Smart Subscription.

NOTE

If no match, it is necessary to perform the LFC or Install Service Pack before proceeding next step.

- **Confirm Change DARC Subnet is not activate (CT)**

This step is confirmation of the CT Scanner DARC Subnet is not configure **User Defined IP**.

NOTE

If DARC Subnet has been changed already in the Site, it is necessary to EES Platform Software Installation.

Refer to **[Smart Subscription Feature Connection]** in **[Revolution EVO Service Methods]**.

3.5 Unpacking the ML350 (EES)

Two persons are necessary for handling, unpacking and moving the HP ML350G10 server into place.

Refer to **[Unpacking the Hardware Units]** in **[Edge Platform Installation Manual]**.

3.6 Cabling Between ML350 and Switch (EES)

Refer to **[Hardware Installation]** in **[Edge Platform Installation Manual]** for ML350 and Switch.

Refer to **[Smart Subscription Feature Connection]** in **[Revolution EVO Service Methods]** for connect CT Scanner and EES.

3.7 Connect FE Laptop to EES

This step is performing configure the FE Laptop for connect to EES.

Refer to **[Connecting Laptop to Server]** in **[Edge Platform Service Guide]**.

3.8 ML350 Hardware Status Check (EES)

This step performs a check of the ML350 hardware status used by iLO [System Information – Health Summary].

Refer to **[launch iLO Web Interface]** in **[Edge Platform Service Guide]** for login iLO.

- Default Local login name & Password : ctadmin

Refer to **[iLO System Information Selection Screen]** in **[Edge Platform Service Guide]**.

Make sure that the M350 hardware status is no error by using iLO System Information Health Summary.

3.9 Site Specific Configuration (EES)

In this procedure, configure EES according to the Customer environment.

- The setting requires the "sequential IP address" provided by the customer.
- This procedure also includes settings for external gateway, network subnet, DNS, and NTP.

Refer to **[Site Configuration]** in **[Edge Platform installation Manual]**.

NOTE

For **NTP** IP address, be sure to enter the IP address of CT eth0.

* Usually the default is 172.16.0.1

3.10 Insite (RSvP) Connection (EES)

This step is performing the [RSvP] Site Configuration.

Refer to **[RSvP Site Configuration]** in **[Edge Platform Service Guide]**.

NOTE

The [CRM Number] is required in this configuration.

3.11 Check Private IP address of EES (EES)

This step is performing check the two IP address on EES.

Refer to **[Get Server IP]** in **[Edge Platform Installation Manual]**.

Record the following two IP Addresses.

- Edison proxy floating IP (external-net0) _____
- Edison private proxy IP (external-net1) _____

Figure 2 Floating IPs



<input type="checkbox"/>	edison	172.16.0.120	-	external-net1
<input type="checkbox"/>	edison	3.246.33.23	-	external-net0

3.12 CT Option Key Install [SmartSubscription - connection] (CT)

This step performs the [SmartSubscription -connection] CT option installation.

After this option installed, CT scanner and EES will communication will establish.

Refer to **[Smart Subscription Feature Connection]** in **[Revolution EVO Service Methods]**.

3.13 Remote Applications Installation (EES)

The EES is providing some application install procedure.

That is necessary to select the install method by each application.


Refer to each application installation manual for more detail.

Refer to **[Application Software Installation Procedure]** in **[Edge Platform installation Manual]**.

3.14 ML350 Platform Software Status Check (EES)

This step is to confirm the EES platform software is running properly after application install.

Refer to SW T/S part of **[Troubleshooting Flowchart]** in **[Edge Platform Service Guide]**.

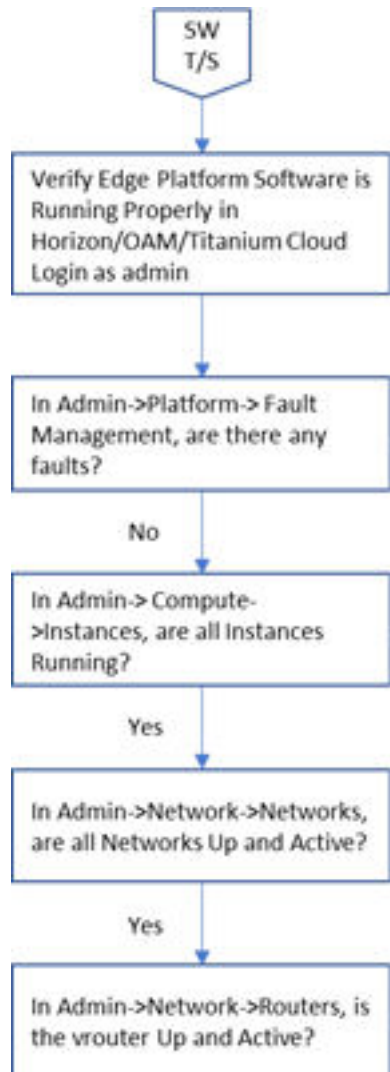Figure 3 Troubleshooting Flowchart

3.15 Cleanup (EES)

Record the site specific parameters using by Site Configuration Sheet.

Refer to [**Appendix X Site Configuration Sheet**] in [**Edge Platform installation Manual**].

Site Registration

Fill out the Site information sheet attached and Send it to GEHCDAAS@he.com.

Figure 4 GEHC Site Installation Information

ITEM	VALUE
Network Details (Site Enterprise IPs)	
iLO	
Site Cidr/subnet	
OAM Public	
Admin Console Public URL	
site gateway	
data-network-range-start IP	
data-network-range-end IP	
Passwords	
wrsroot	
admin	
iLO admin	
Edison-usr	
centos	
BIOS	
Encryption manager	
Applications	
App 1	
App 2	
App 3	
App 4	
App 5	
App 6	
Other Details	
HP Account Username and Password	
Configuration Backup and Restore Password	
Site NAS Access Details	

